

NEW!

Symphony PLUS Pumping Programs

For mothers of term and preterm infants.

Quick start instructions

The Symphony PLUS breast pump, with its research-based pumping programs, has been specifically developed to support mothers throughout their lactation journey, helping to initiate, build and maintain an adequate milk production.

Double-pumping is recommended, as this can help to increase and maintain milk production.

Symphony PLUS contains two pumping programs:




1 The **INITIATE** program supports mothers to successfully initiate milk production. The program mimics the irregular and more rapid sucking and pausing pattern of a new born infant in the first days of lactation.

2 The **MAINTAIN** program is designed to build and maintain an adequate milk production and optimize milk output after secretory activation (milk coming in) has occurred. The program, with its 2-Phase Expression technology, mimics an infant's sucking pattern during established lactation.

1 **The INITIATE program**
Use the INITIATE program directly after birth:
✓ Every 2-3 hours or 8 times a day
✓ For up to five days, **OR**
✓ Until you have expressed a minimum of 20 ml from both breasts combined in 3 consecutive pumping sessions.
Once selected, the INITIATE program runs automatically for 15 minutes, with several pauses. It is important to complete the full program. At the end of the program the display shows "Program complete". The pump switches off automatically.

2 **The MAINTAIN program**
Use the MAINTAIN program after secretory activation (milk coming in) if:
✓ The INITIATE Program has been successfully used as per above, **OR**
✓ Breastfeeding has been established, **OR**
✓ You are more than five days post birth.
Continue pumping until the breasts feel well drained and soft all over. Switch the pump off manually when the pumping session is finished. On average, pumping sessions last approximately 15 minutes.

 Note: These quick instructions do not replace the regular Instructions for Use. Please refer to Symphony Instructions for Use for more detailed information.

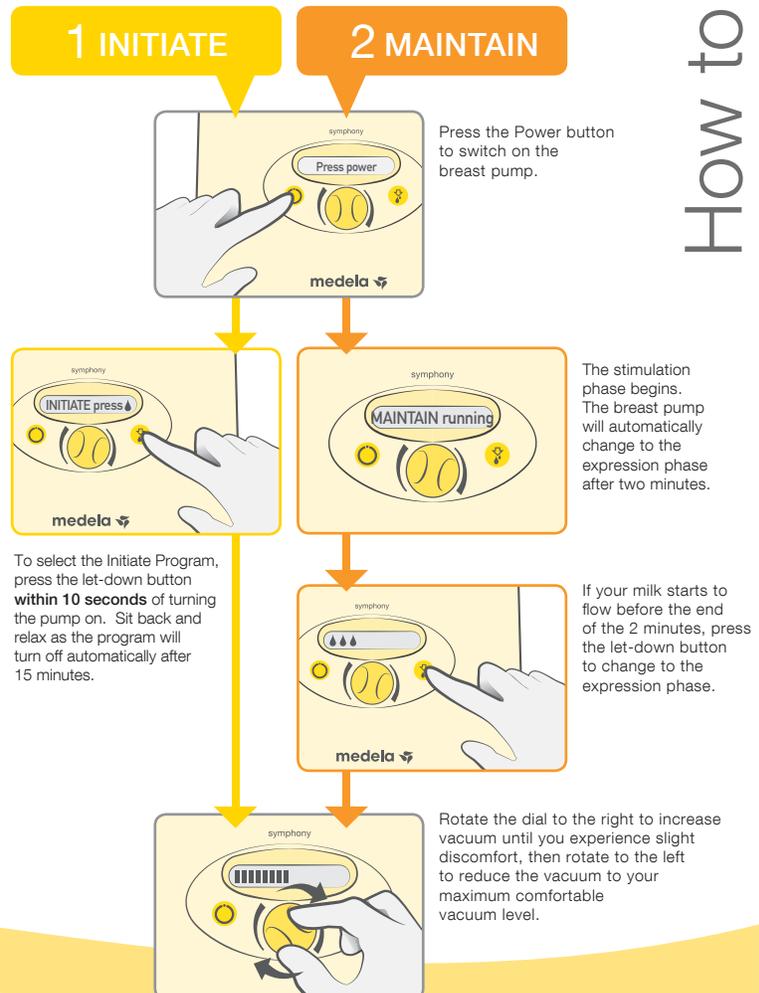

NOUVEAU!

medela 

Programmes d'expression de Symphony PLUS

Pour les mamans de bébés prématurés ou nés à terme

Instructions de démarrage rapide

Le tire-lait Symphony PLUS et ses programmes d'expression basés sur la recherche ont été spécifiquement conçus pour assister les mamans tout au long de l'évolution de leur lactation: initier, augmenter et maintenir une production de lait adéquate.

L'expression double est recommandée pour augmenter et maintenir la production de lait.

Symphony PLUS dispose de deux programmes d'expression :



1 Le programme INITIATION aide les mamans à initier avec succès leur production de lait. Le programme imite le rythme de succion irrégulier d'un nouveau-né lors des premiers jours de lactation, tantôt tétant plus rapidement, tantôt plus lentement.

2 Le programme MAINTIEN est conçu afin d'augmenter et maintenir une production de lait adéquate une fois la lactation activée (montée de lait). Le programme avec sa technologie 2-Phase Expression, imite le rythme de succion d'un nourrisson.

1 Le programme INITIATION (Initiate)

Utilisez le programme INITIATION dès la naissance :

- ✓ Chaque 2-3 heures ou 8 fois par jour
- ✓ Jusqu'à un maximum de cinq jours, **OU**
- ✓ Jusqu'à ce que vous ayez exprimé au moins 20 ml au total des deux seins 3 fois de suite, **OU**

Une fois choisi, le programme INITIATION s'active automatiquement pendant 15 minutes et inclut plusieurs pauses. Il est important de laisser le programme fonctionner dans sa totalité. À la fin du programme, l'écran affiche « Fin » et le tire-lait s'éteint automatiquement.

2 Le programme MAINTIEN (Maintain)

Utilisez le programme MAINTIEN après l'activation de la lactation (montée de lait) si :

- ✓ Le programme INITIATION a été utilisé avec succès selon les instructions ci-dessus, **OU**
- ✓ L'allaitement a été commencé avec succès, **OU**
- ✓ Vous êtes au delà du cinquième jour après l'accouchement.


Continuez l'expression jusqu'à ce que vous sentiez que votre sein est bien drainé et souple dans sa totalité. Le programme d'expression doit être éteint manuellement à la fin de la séance. En moyenne, les séances d'expression durent approximativement 15 minutes.



Remarque : ces instructions rapides ne remplacent pas le mode d'emploi habituel. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez vous référer au mode d'emploi de Symphony.

1 INITIATION (Initiate)


2 MAINTIEN (Maintain)

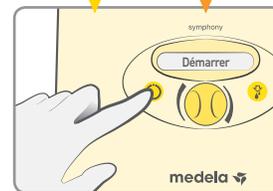


Mettez en marche le tire-lait (à l'aide du bouton on/off).




Pour obtenir le programme d'INITIATION, appuyez sur le bouton d'écoulement **dans les 10 secondes** suivant la mise en marche du tire-lait. Assoyez-vous confortablement et relaxez. Le programme s'arrêtera automatiquement après 15 minutes.

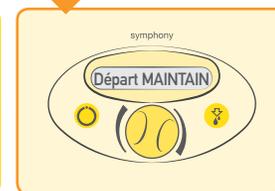

Le programme de MAINTIEN démarrera automatiquement si aucun bouton n'est appuyé. Le tire-lait débutera en phase Stimulation et changera automatiquement en phase Expression après 2 minutes.

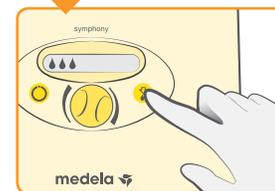

Si le lait commence à s'écouler avant que le délai de 2 minutes n'expire, appuyez sur le bouton d'écoulement pour passer en phase d'expression.

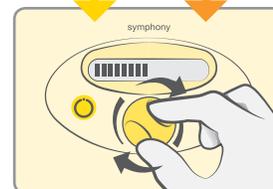

Tournez le bouton vers la droite pour augmenter l'aspiration jusqu'à ce que vous ressentiez une légère gêne, puis tournez-le vers la gauche pour diminuer l'aspiration et atteindre votre niveau de confort maximal.

Instructions



Fabriqué par Medela AG, Lättichstrasse 4b, 6341 Baar, Suisse.
Distribué par Medela Canada Inc. 4160 Sladeview Crescent, Unité #8, Mississauga, Ontario, L5L 0A1
Téléphone: 1 800 435 8316 info@medela.ca www.medela.ca 7900274 B 0406

English ►